

icare
TONOVET
Pro



QUICK GUIDE




DANSK



NO ANESTHESIA
NO CALIBRATION

TÆNDER TONOMETERET OG LADER PROBEN


1. Tryk på Select- eller Measure-knappen for at tænde tonometeret. Illustrationer af disse alternative måder at starte på. Husk at bruge håndledsremmen.

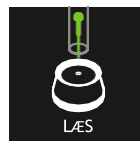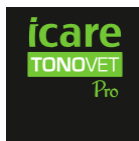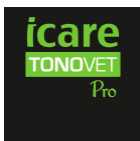

Tryk på Select-knappen


Tryk på Measure-knappen

2. Åbn probe-røret ved at fjerne hættten og indsæt proben i probe-basen, som vist på billedet.
3. Når standardmålteksten vises på skærmen, tryk på Mål-knappen for at starte Standardmåling eller tryk til venstre for at vælge Hurtigmåling.
4. Tryk på Mål-knappen for at starte målingen.

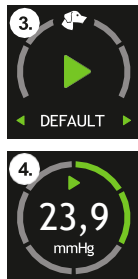


Ændring af indstillingen for forskellige


arter. For at ændre indstillingen for forskellige arter skal du trykke på select-knappen for at få adgang til menuen. Tryk på Navigationsknapper og vælg SET-TING ved at trykke på Select-knappen. Brug navigationsknapperne til at skifte indstillinger. For at vælge en art, tryk på Select-knappen. For at begynde at måle, brug navigationsknapperne for at vende tilbage til MÅL.

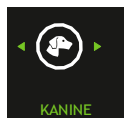


KANINE

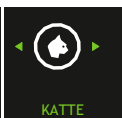

KATTE

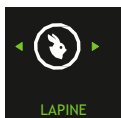

LAPINE

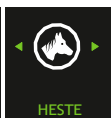


HESTE



MÅLING

1. Før tonometeret tæt på patientens øje.

BEMÆRK! Undgå overdreven fastholdelse, da det kan ændre IOP'en. Patientens hoved bør holdes så let som muligt; Vær forsigtig med ikke at lægge pres på nakken eller øjeæblet. Hvis kraven bæres, skal du sørge for, at den ikke sidder for stramt, eller fjern den til måling.

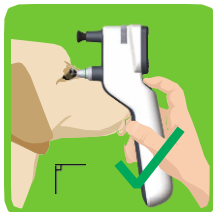

2. For at udføre en vellykket måling bør afstanden fra spidsen af proben til patientens hornhinde (se billeder) være cirka 4-8 mm (ca. 5/32 - 5/16 tommes). Før tonometeret foran patientens øje med proben pegende mod hornhindens centrum.

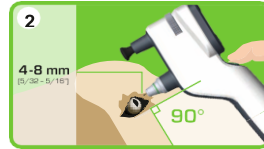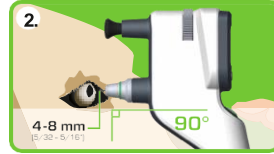


Lampen på probens base skal være grøn (angiver korrekt måleposition).

3. **Standardmål.** Sonden vil kontakte øjet under målinger: tryk og hold Measure-knappen nede for at indsamle 6 målinger i **Serie-tilstand**, eller tryk knappen kort 6 gange for at indsamle 1 måling ad gangen i **Single-tilstand**. De grå segmenter af cirklen på skærmen bliver grønne én efter én.
4. **Hurtig foranstaltning.** Sonden vil kontakte øjet under målinger: tryk og hold Mål-knappen nede for at indsamle 2-3 målinger i **serietilstand**, eller tryk knappen kort 2-3 gange for at indsamle 1 måling ad gangen i **Enkelt-tilstand**. De grå segmenter af cirklen på skærmen bliver magenta én efter én.

VISNING UNDER MÅLING

STANDARDMÅL

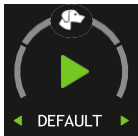

Før første Måling



Efter den anden Måling



Efter sjette Måling



Efter den sjette måling, men med acceptable variation*



Efter den sjette måling, men også med stor variation**



Gentag measurement Sikkert**

HURTIG MÅLING



Før første Måling



Efter den anden Måling



Efter anden eller tredje måling



Efter tredje måling, men med acceptabel variation*

* Målingen bør gentages, hvis resultatet overstiger 25 mmHg

** Målingen bør gentages (BEMÆRK: Ved meget høje IOP'er kan udsvinget være højere end normalt)



ET KORT BIP —

Indikerer en korrekt enkelt måling.

DOBBELT BIP — —


Indikerer en forkert enkelt måling. (Se fejlmeddelelser fra brugsanvisningen).

LANGT BIP —————

Indikerer, at seks succesfulde målinger er udført, og IOP-resultatet er tilgængeligt på displayet.

DELE AF TONOMETERET

1. Måling af støtte
3. Probebase
- Probe basekrave
4. Justeringshjul til måling
Støtte
5. Skærm
6. Brugergrænseflade
7. Navigationsknapper
8. Vælg knap
9. Mål-knap

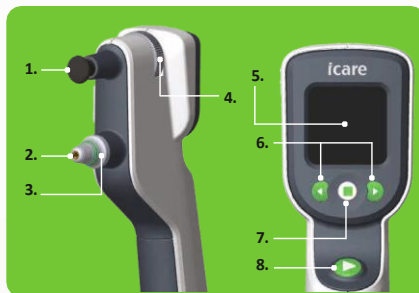

UDSKIFTNING ELLER RENGØRING AF PROBE-BASEN

Under brugen kan noget snavs samle sig i probens base, hvilket påvirker probens bevægelse. **Udskift probe-basen hver 12. måned. Rengør probe-basen hver 3. måned.** Den reneste probebase er en ny probebase.

1. Sluk for strømmen på tonometeret.
2. Skru probens basekrave af og fjern proben Base fra tonometeret.
3. Indsæt probebasen i rengøringsbeholderen fyldt med 70-100% isopropylalkohol og lad den trække i 5-30 minutter.
4. Fjern og tør probens bund ved at blæse noget ren dase- eller trykluft ind i den.
5. Sæt den helt tørre probe-base i igen og skru kraven på probens base tilbage. Alternativt kan du indsætte en ny probe-base.

Se venligst brugsanvisningen for mere detaljerede instruktioner til udskiftning og rengøring af probebasen.



Besøg **TONOVET YouTube-kanalen**
for videoer om IOP-måling og rengøring
af probe-base.
youtube.com/@tonovetnometer4327



Se brugsanvisningen for
yderligere information.
www.tonovet.com/eifu