

EICKWARM H₂O

OPVARMNINGSSENHED TIL SMÅ DYR

HURTIG GUIDE




Nr. 648020

TELEFON +45 70 20 50 19
www.eickemeyer.dk




veterinary technology for life
Eickemeyer®

1. ENHED

1.1 Front

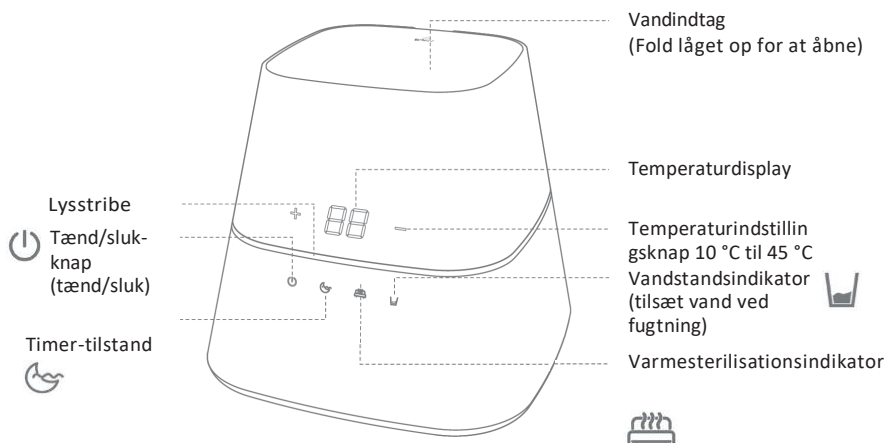


1.2 Tilbage

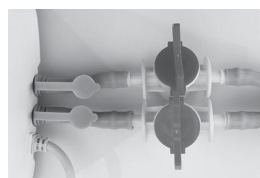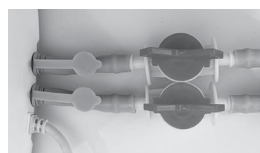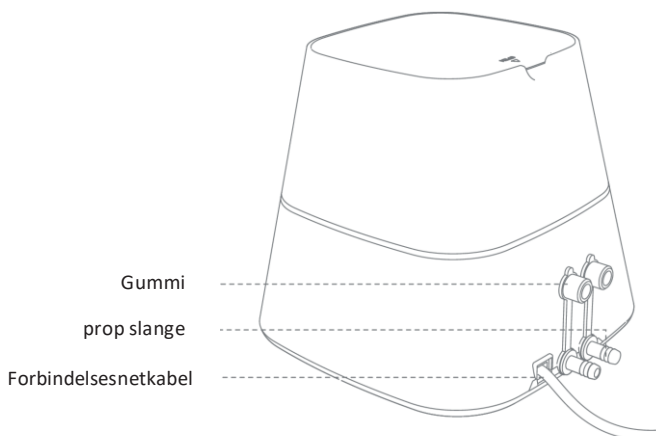


2. FORBEREDELSE TIL BRUG

Trin 1: Placer enheden på en flad overflade

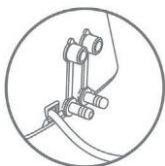

- Sørg for, at der er en afstand **på mere end 5 cm** mellem enheden og varmemåtten.
- Enheden skal være i samme højde eller lidt højere end varmemåtten.
- Placer ikke enheden på en ujævn overflade (automatisk slukning kan udløses).

Trin 2: Forbind afspærringsventilerne og slangen til enheden

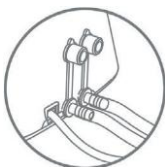


- Forbind de to afspærringsventiler til enheden.
- Forbind slangerne fra varmemåtten til afspærringsventilerne.
- Åbn afspærringsventilerne.
- For at skifte måtten, luk afspærringsventilerne.

Trin 3: Tilslut enheden til strømforsyningen og tryk på tænd/sluk-knappen



- "Bip"-signalet signalerer, at strømmen er tændt.
- Under den indledende opsætning vises fejlkoden "E1" (vandstand for lavt).
- Vandstandsindikatoren blinker ledsaget af flere "bip".

Trin 4: Fyld enheden med destilleret vand

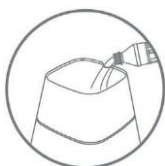

- Åbn dækslet til vandindtaget og fyld med vand, indtil vandet er Niveauindikatoren går ud.
- Vandstandsindikatoren kan blinke igen, når vandet løber ned i varmemåtten.
- Bliv ved med at tilsætte vand, indtil displayet slukker.
- Luk låget, når enheden og varmemåtten er fulde.



Brug kun destilleret vand!

3. DRIFT

3.1 Indstilling af temperaturen

- Tryk på op- og ned-pilknapperne for at indstille den ønskede temperatur.
- Opvarmningstemperaturen kan indstilles mellem 10 °C og 45 °C.
- Den aktuelle vandtemperatur vises på enhedens display. Denne værdi nærmer sig den ønskede temperatur, når enheden cirkulerer det opvarmede vand.

3.2 Indstilling af timer-tilstand

- Der er 3 forskellige tilstande tilgængelige.
C1 – Normal timer-tilstand
C2 – Køler-timer-tilstand
C3 – Varmere timer-tilstand
- Hold timer-tilstandsknappen nede i 2 sekunder for at holde mellem tilstandene.
- For at forlade timer-tilstand skal du trykke på en af pileknapperne for temperaturindstillingen.

3.2.1 Normal tilstand (8 timer)

- Holder en temperatur på 36 °C de første 30 minutter.
- Efter 30 minutter falder temperaturen til 32 °C, hvilket holdes i 6 timer.
- I de sidste 1,5 time vender temperaturen tilbage til 36 °C.

3.2.2 Køletilstand (14,5 t)

- Holder en temperatur på 32 °C de første 30 minutter.
- Efter 30 minutter falder temperaturen til 30 °C, hvilket holdes i 6 timer.
- Efter yderligere 60 minutter falder temperaturen til 28 °C, hvor temperaturen holdes i 4 timer.
- I de sidste 2,5 timer stiger temperaturen igen til 32 °C.

3.2.3 Varm tilstand (14 t)

- Holder en temperatur på 38 °C de første 30 minutter.
- Efter 30 minutter falder temperaturen til 36 °C, som holdes i 6 timer.
- Efter yderligere 60 minutter falder temperaturen til 34 °C, hvor den forbliver i 4 timer.
- I de sidste 2,5 timer stiger temperaturen tilbage til 38 °C.

3.3 Automatisk dæmpningstilstand

- Hvis der ikke trykkes på en knap i 30 sekunder, skifter lysstrimlen til dæmpningstilstand.
- For at ændre enhedskontrollen igen, skal du blot trykke på en hvilken som helst knap på enheden.

4. SÆRLIGE INDSTILLINGER

4.1 Indstilling af timeren

- Timeren kan sættes fra 1 til 24 timer. Når den forudindstillede tid er udløbet, slukker enheden automatisk.
- Efter at have trykket på timer-knappen to gange, blinker displayet.
- Indstil det ønskede tidspunkt ved at trykke på op- og ned-pil-knapperne.
- Så snart måltiden vises, aktiveres indstillingen efter 5 sekunder, og displayet skifter til temperaturdisplayet.
- Tryk på timer-knappen to gange eller tænd og tænd enheden for at deaktivere timerfunktionen.
- Enheden slukker ikke automatisk, hvis timeren er sat til "00".

4.2 Indstilling af børnesikring

- Børnesikringen bruges for at forhindre uønsket operation.
- Med enheden tændt, tryk på børnesikringsknappen for at slå funktionen til eller fra.
 - *Display E5* *LÅS PÅ*
 - *Display EC* *LÅS AF*
- Når låsetilstand aktiveres, deaktiveres knapperne.

4.3 Skift mellem Fahrenheit (°F) og Celsius (°C)

- Tryk og hold tændingsknappen nede i 20 sekunder, indtil "D1" (°C) eller "D0" (°F) vises.
- Genstart af systemet aktiverer den ønskede værdi.

5. RESERVEDELE

Kunst. Nej.	Beskrivelse
E64802001	Varmemåtte, lille, L 55 x B 55 cm
E64802002	Varmemåtte, stor, L 55 x B 100 cm

Kun til veterinærbrug!

Som med alle varmeapparater skal patienter regelmæssigt kontrolleres for trykpunkter og mulig overophedning.



NOTER

[illegible]

TYSKLAND

EICKEMEYER KG
Eltastraße 8
78532 Tuttlingen
T +49 7461 96 580 0
F +49 7461 96 580 90
info@eickemeyer.de
www.eickemeyer.de

SCHWEIZ

EICKEMEYER AG
Sandgrube 29
9050 Appenzell
T +41 71 788 23 13
F +41 71 788 23 14
info@eickemeyer.ch
www.eickemeyer.ch

POLEN

EICKEMEYER Sp. z o.o.
27 Jana Pawła II Avenue
00-867 Warszawa
T +48 22 185 55 76
F +48 22 185 59 40
info@eickemeyer.pl
www.eickemeyer.pl

ITALIEN

EICKEMEYER S.R.L.
Via G. Verdi 8
65015 Montesilvano (PE)
T +39 085 935 4078
F +39 085 935 9471
info@eickemeyer.it
www.eickemeyer.it

DANMARK

EICKEMEYER ApS
Solbakken 26, Hammelev
6500 Vojens
T +45 7020 5019
info@eickemeyer.dk
www.eickemeyer.dk

HOLLAND EICKEMEYER

B.V.
Doejenburg 203
4021 HR Maurik
T +31 345 58 9400
info@eickemeyer.nl
www.eickemeyer.nl

STORBRITANNIEN

EICKEMEYER Ltd.
3 Vindmølle
Forretningslandsby
Brooklands Close
Sunbury-on-Thames
Surrey, TW16 7DY
T +44 20 8891 2007
info@eickemeyer.co.uk
www.eickemeyer.co.uk

CANADA

EICKEMEYER Inc.
617 Douro-gade
Suite 205
Stratford, ON Canada
N5A 0B5
T +1 519 273 5558
info@eickemeyervet.ca
www.eickemeyercanada.ca